

228/229 Barrier-Free® Power Examination Chair Setup Instructions



WARNING

Heavy object. Use lifting aids and proper lifting techniques when moving chair to minimize muscle strains or back injury.

Tools:

Battery Powered Drill/Impact Driver
Standard Wrench Set
Standard Deep Well Socket Set
Box Cutter
Furniture Dolly (4 Wheel)




Equipment Alert

When moving the chair, you must adhere to the following instructions.

ALWAYS: a) Transport chair in full-down position with base shroud supports in place.


NEVER: a) Push on base shrouds.
b) Lift chair by stirrups, back section or upholstered top.

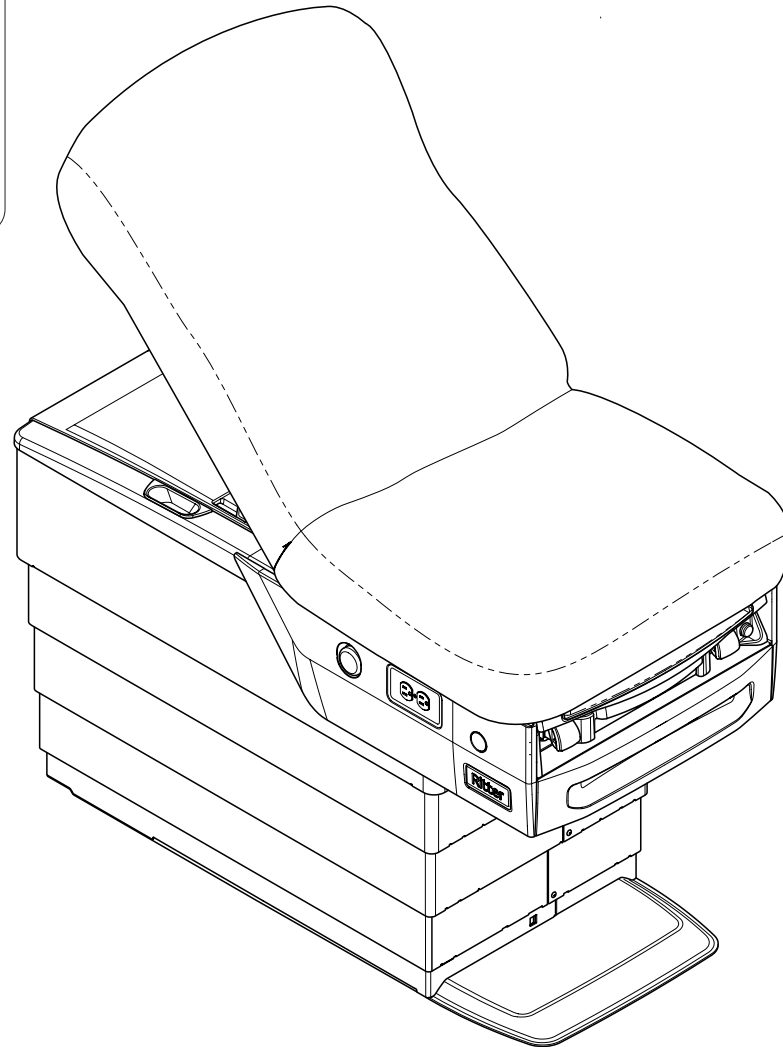


0 0 3 - 1 0 8 8 1 - 9 9


Step 1:

Remove brackets (4) from skid to release chair.

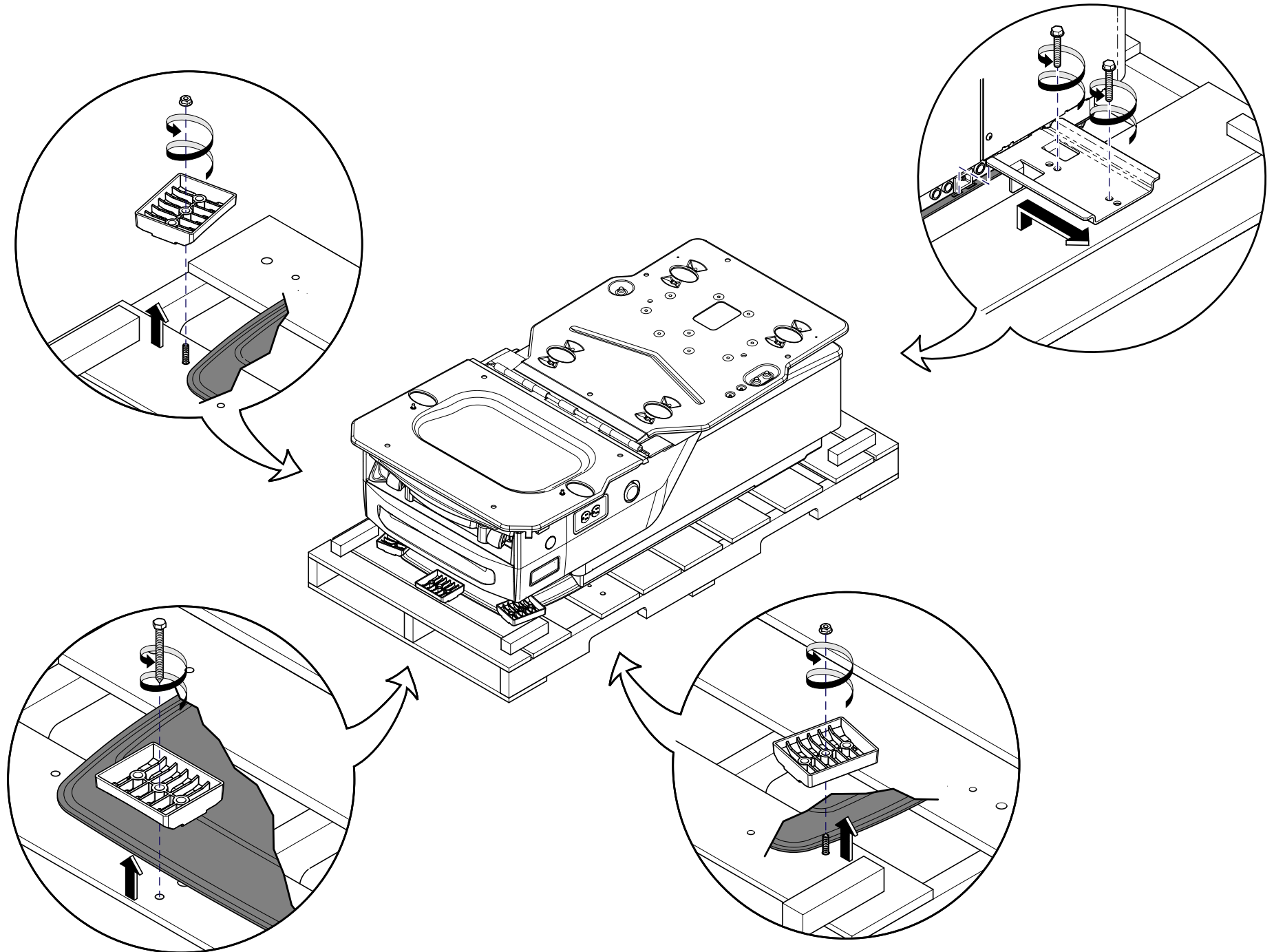


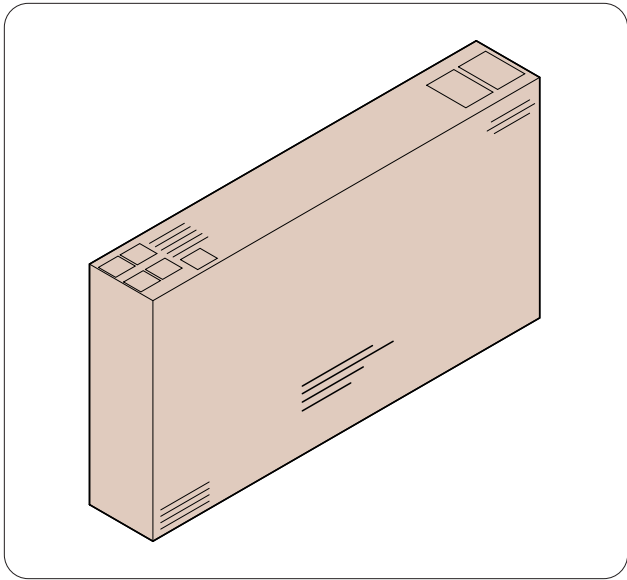


Step 2:
Locate box containing upholstery.

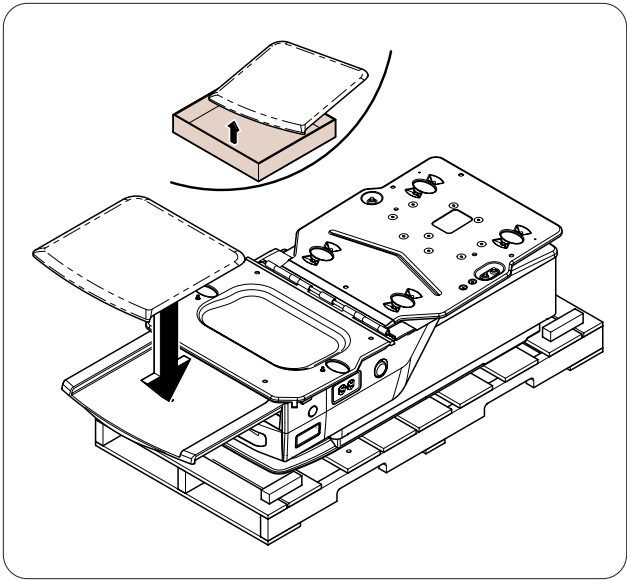


Step 3:
Place footrest upholstery, inserting pin on bottom of upholstery into footrest shelf hole.

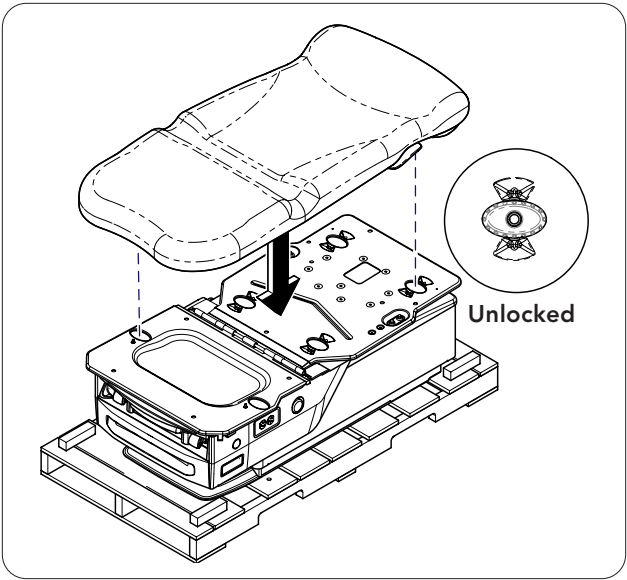


Step 4:
With locking knobs (4) in the unlocked position, place upholstery on chair top aligning locking knobs with holes.

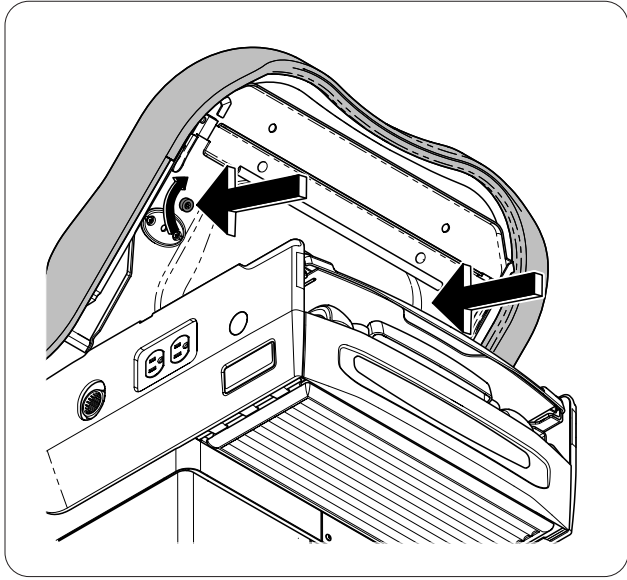


Step 5:
Raise seat pan 90 degrees and secure seat section using attached thumb screws (2). Lower seat pan.

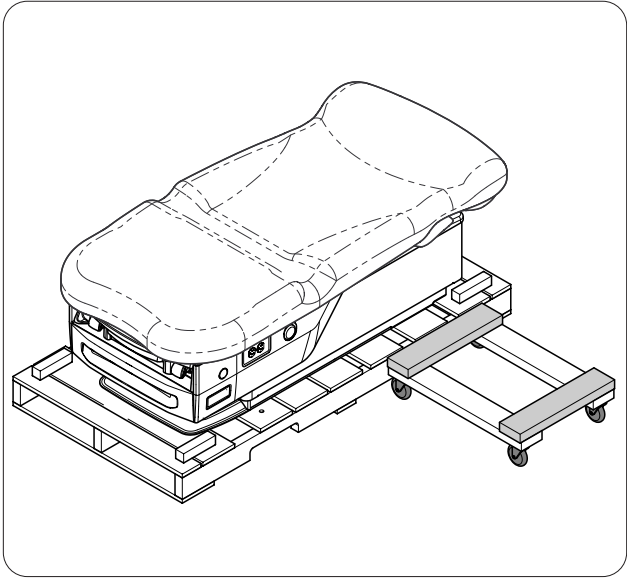


Step 6:
Place dolly next to head end of chair.

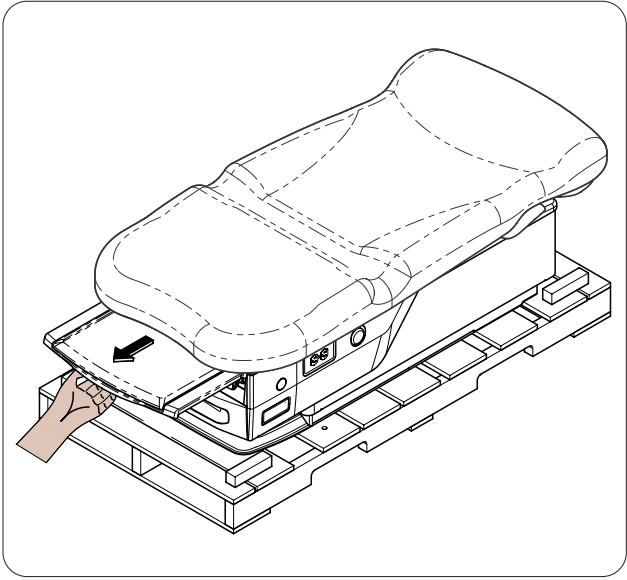


Step 7:
Slide footrest 9-10 inches out of chair.

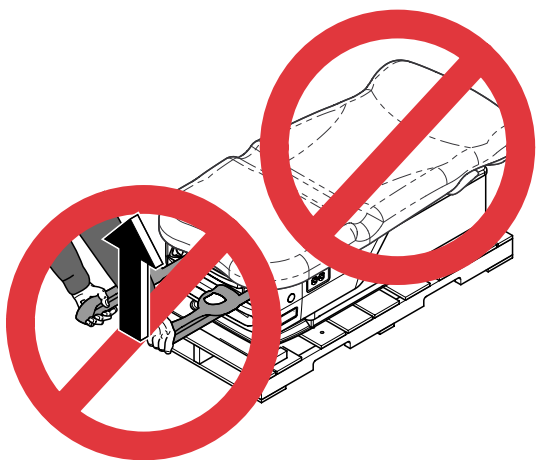


Equipment Alert
Do NOT lift chair by Upholstery
or Stirrups.

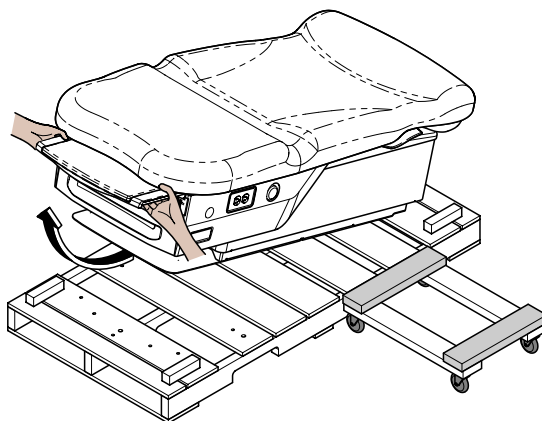


Step 8:
Using proper lifting technique, lift chair off front of skid.

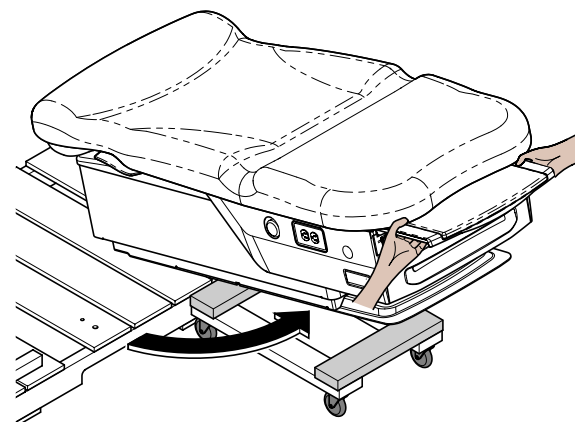


Step 9:
Rotate chair to dolly.

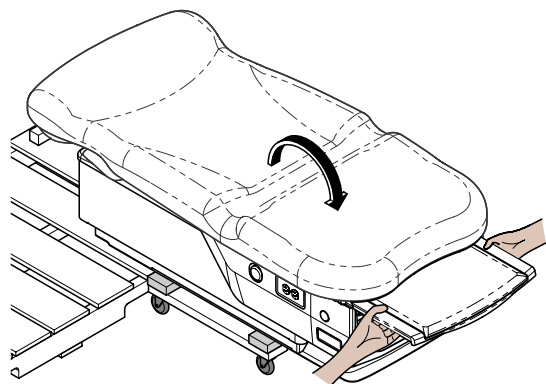

Step 10:
Lower chair onto dolly.

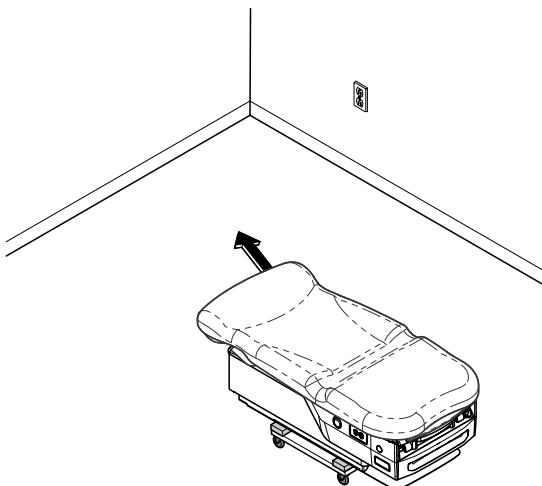


Step 11:
Move chair to desired location.

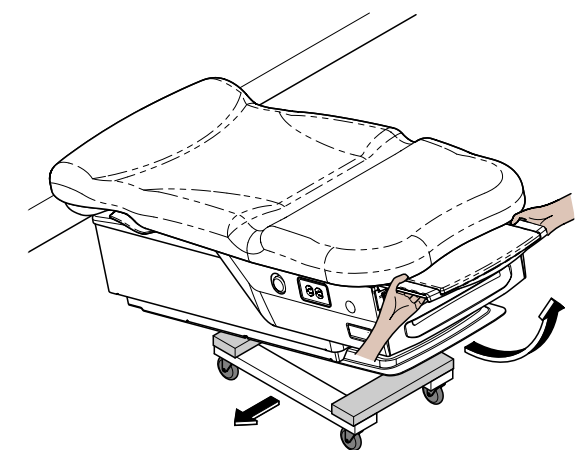


Step 12:
Remove chair from dolly.

Before connecting the Midmark device power cord into an electrical power source outlet, it is recommended to contact a local licensed electrician or a local authority having jurisdiction over the internal building power distribution to verify that the device when powered up will comply with all local, state and federal electrical codes. Use the electrical power rating marked on the device when determining the appropriate electrical branch circuit and outlet requirements. For 115V rated device models with a current rating at or above 12 Amps, a dedicated branch circuit may be required if the branch circuit protection is provided by a 15 Amp breaker.

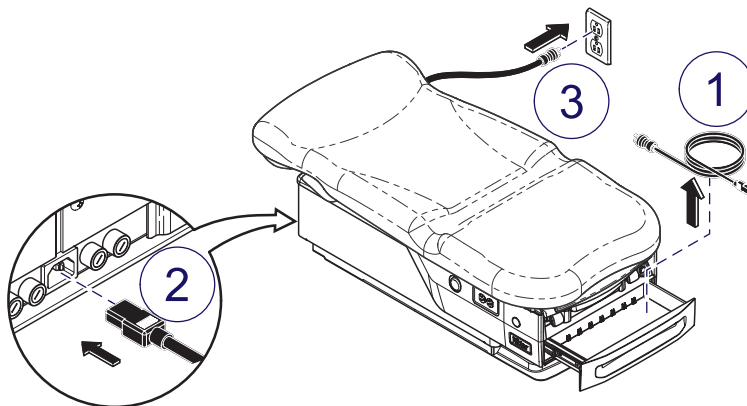


Step 13:

Remove power cord from drawer, connect to rear of chair and plug into wall or floor outlet.

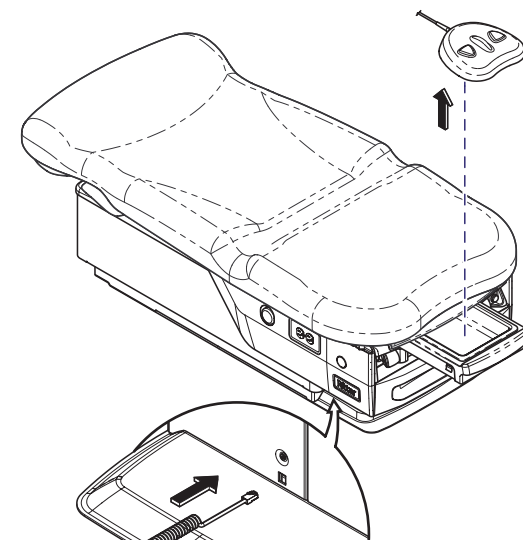


Step 14:

Remove foot control from treatment pan.
Connect foot control to front base of chair.

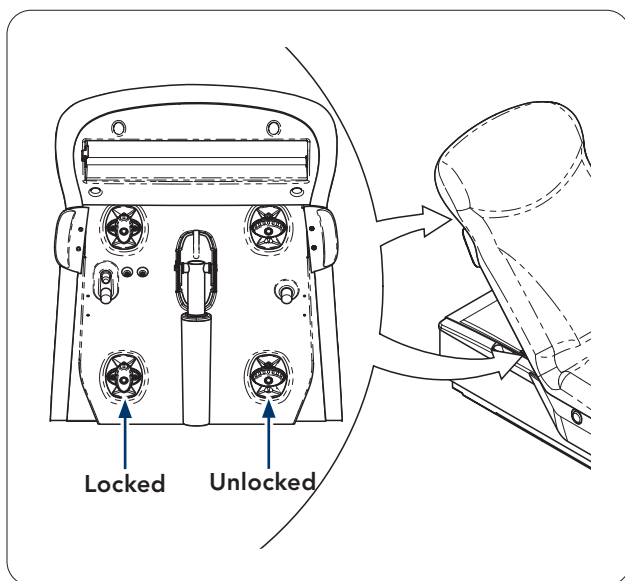

Step 15:

Raise back and latch upholstery locking knobs (4).

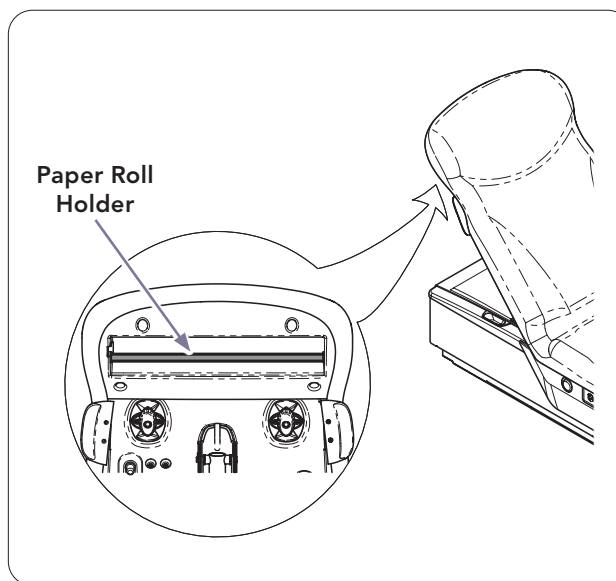


Step 16:

Ensure paper roll holder is in place.




Equipment Alert

The chair must be leveled or stable to ensure proper operation.

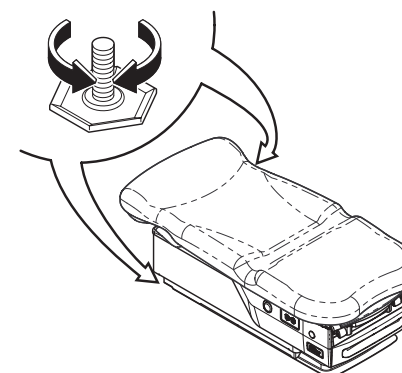


Step 17:


Adjust leveling screws (2) at head end of chair to level or balance chair.

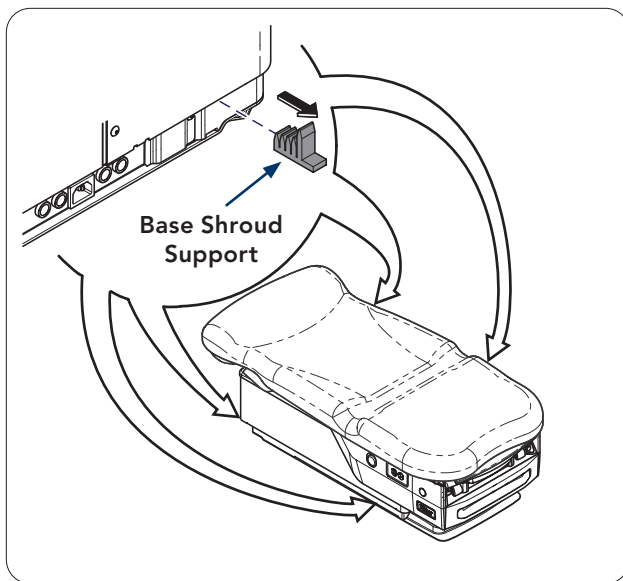

Step 18:
Remove base shroud supports (4).

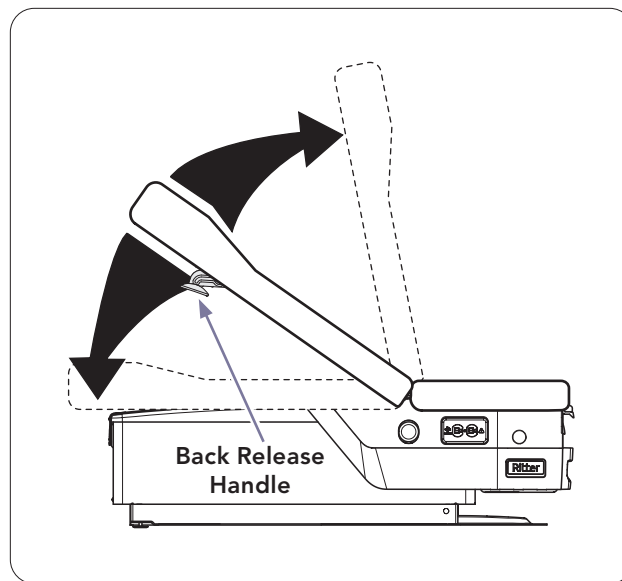


Step 19: (228 Only)
Verify proper manual Back operation.

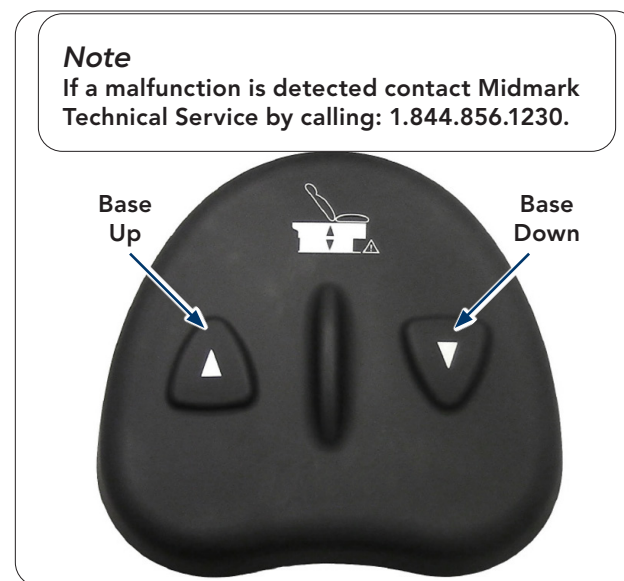


Note
If a malfunction is detected contact Midmark Technical Service by calling: 1.844.856.1230.

Step 20: (228 Only)
Verify proper operation of foot control. Press buttons for Base Up/Down.

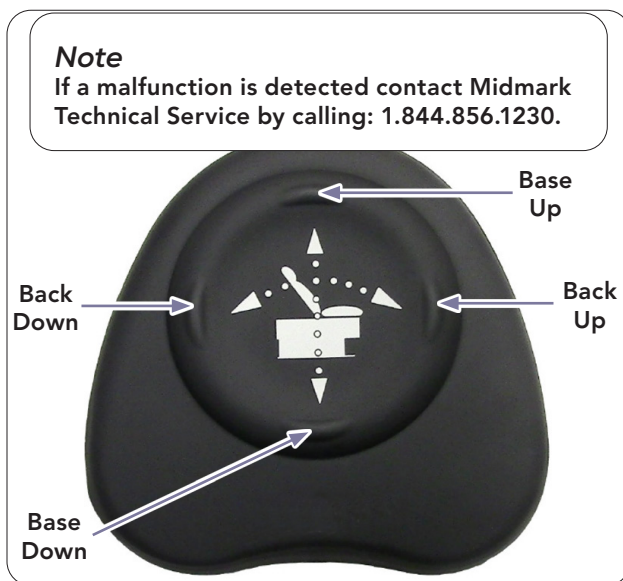

Note
If a malfunction is detected contact Midmark Technical Service by calling: 1.844.856.1230.

Step 21: (229 Only)
Verify proper operation of foot control. Press buttons for Base Up/Down and Back Up/Down.

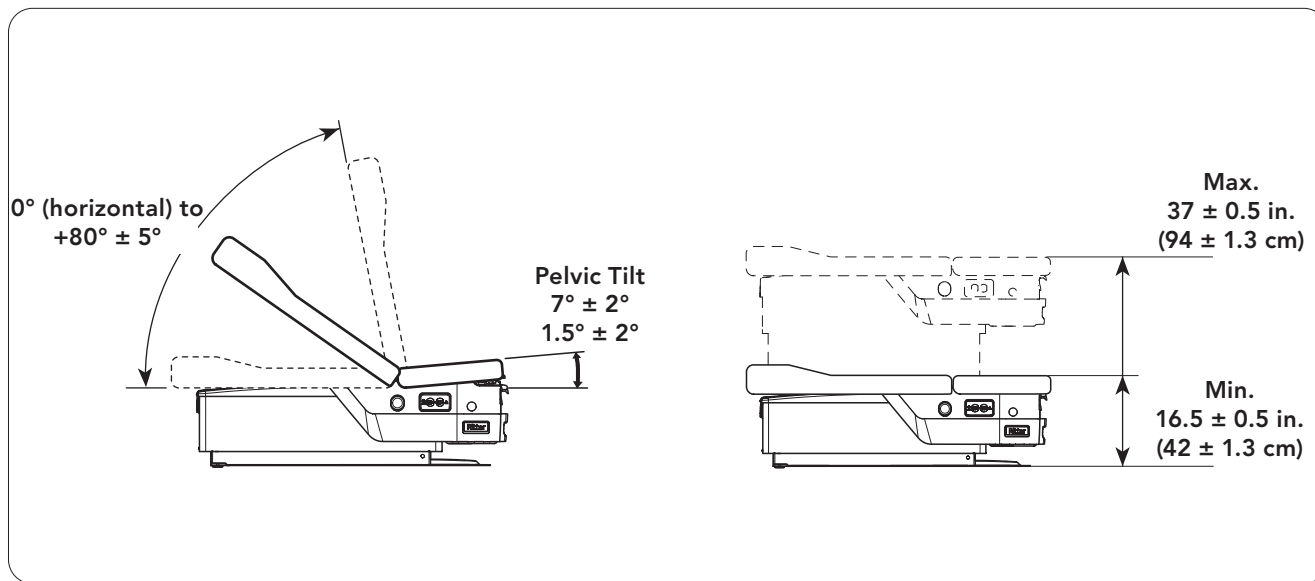

Chair range of motion

Instructions de montage du fauteuil d'examen à commande électrique 228/229 Barrier-Free®



AVERTISSEMENT

Objet lourd. Utilisez des dispositifs de levage et appliquez des techniques de levage appropriées lorsque vous manipulez le fauteuil afin d'éviter tout risque de claquage ou de douleurs au dos.

Outils :

Perceuse/visseuse sans fil
Jeu de clés standard
Jeu de clés à douille longue standard
Cutter
Chariot à roulettes (4 roues)




Avertissement concernant l'équipement

Lorsque vous déplacez le fauteuil, vous devez respecter les instructions suivantes.


TOUJOURS : a) Transporter le fauteuil en position complètement abaissée avec les supports de revêtement de l'assise en position.


NE JAMAIS : a) Appuyer sur les revêtements de l'assise.
b) Soulever le fauteuil par les étriers, le dossier ou la pièce de sellerie supérieure.

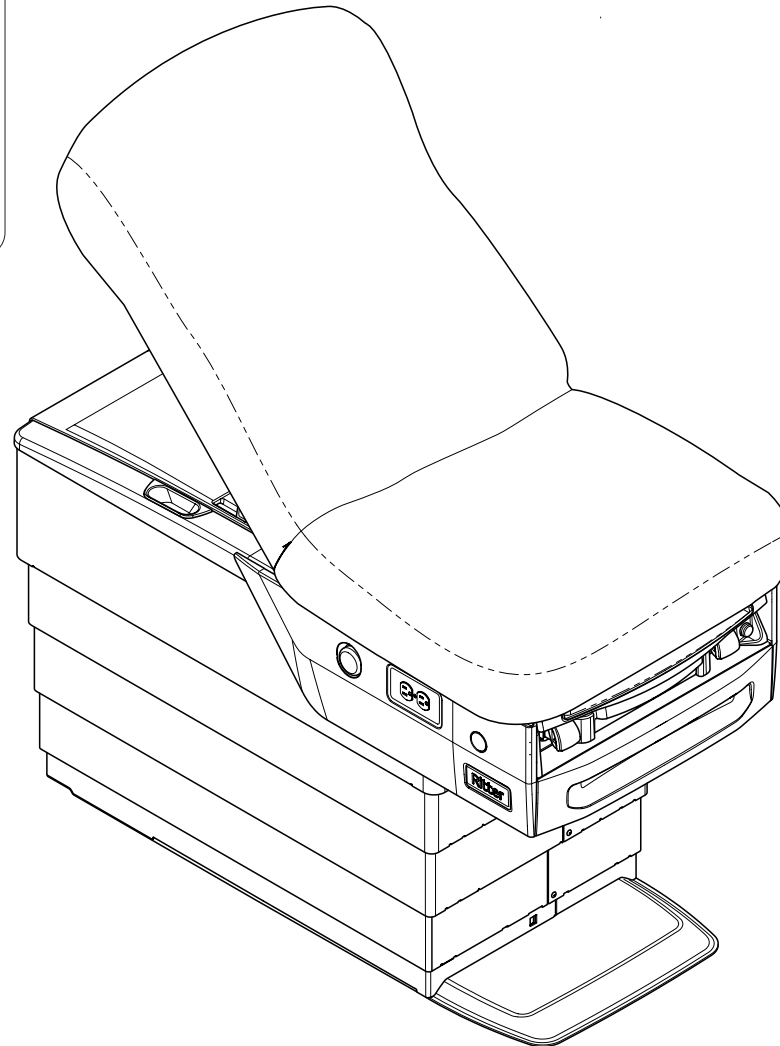


Étape 1 :

Retirer les supports (4) de la palette pour libérer le fauteuil.

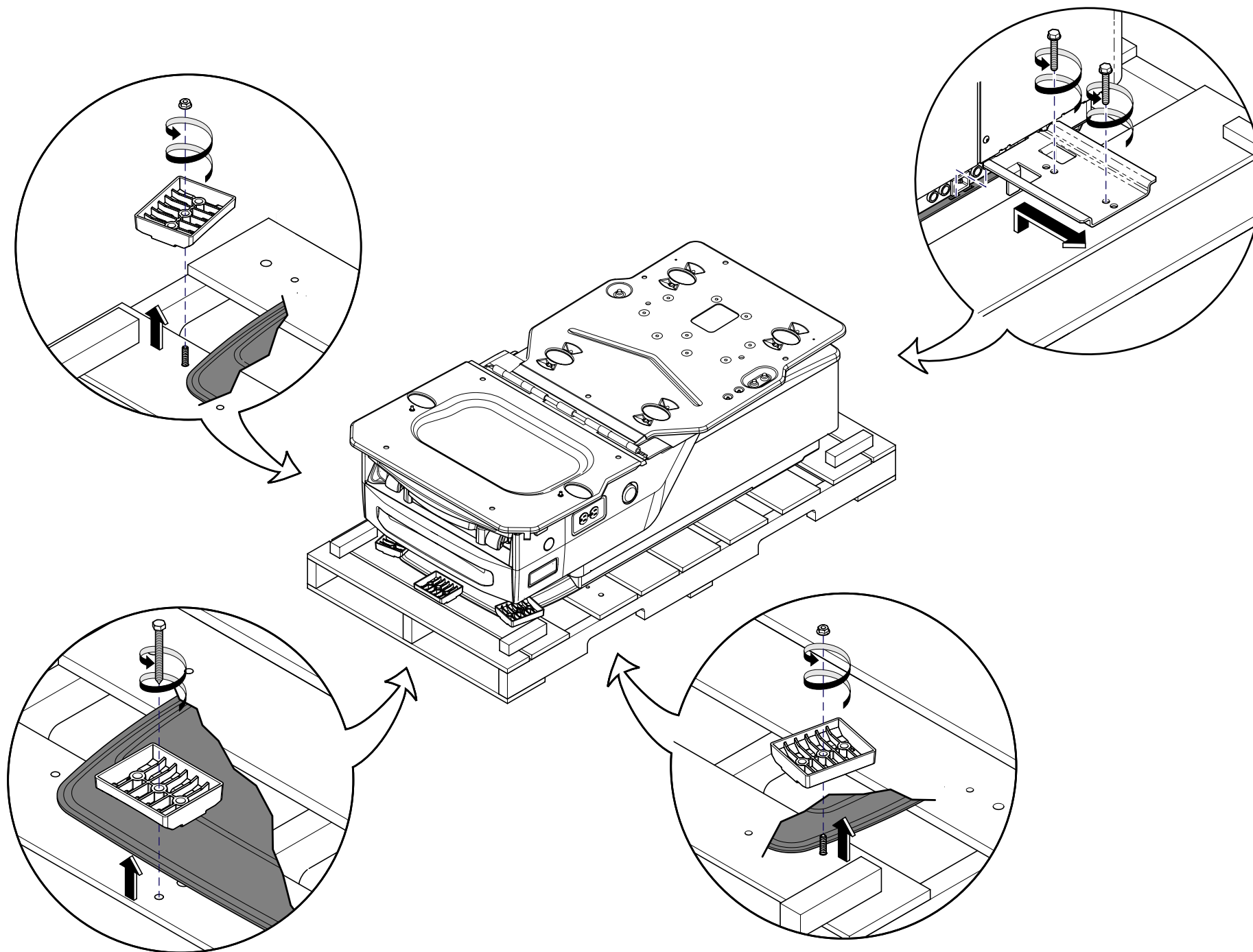


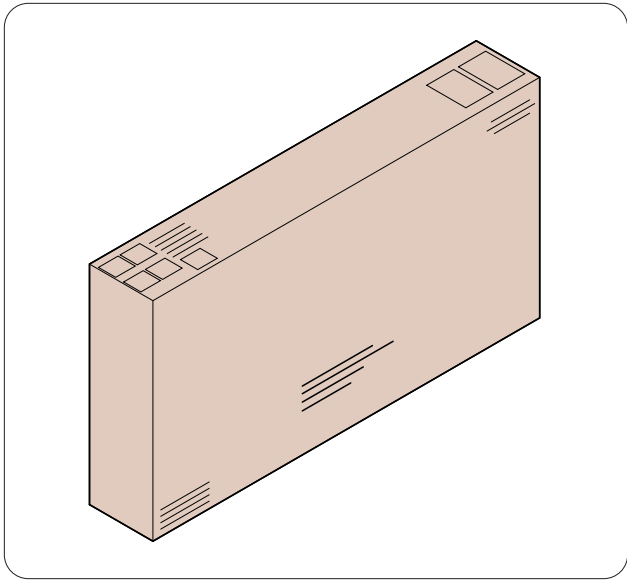


Étape 2 :
Repérer la boîte contenant la sellerie.

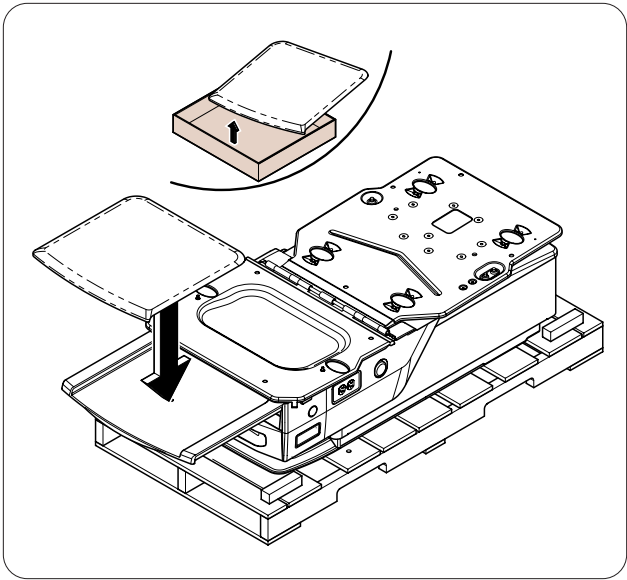


Étape 3 :
Placer la sellerie du repose-pied, en insérant la tige située à l'arrière de la sellerie à travers le trou du repose-pied.

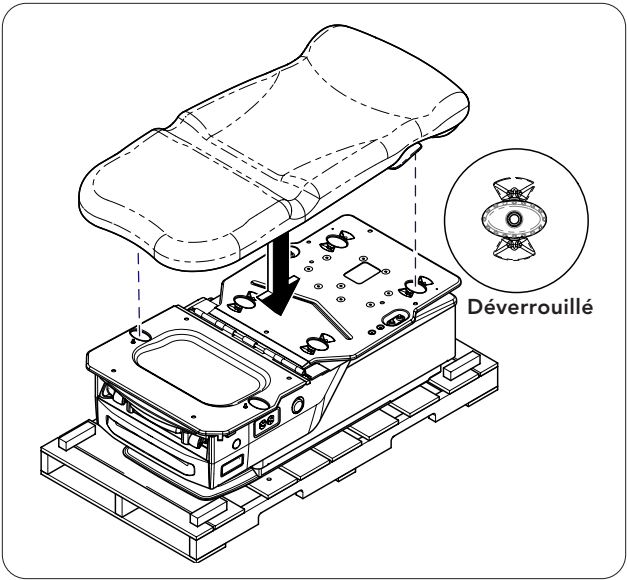


Étape 4 :
Avec les boutons de verrouillage (4) en position déverrouillée, placer la sellerie sur le dessus du fauteuil en alignant les boutons de verrouillage avec les trous.

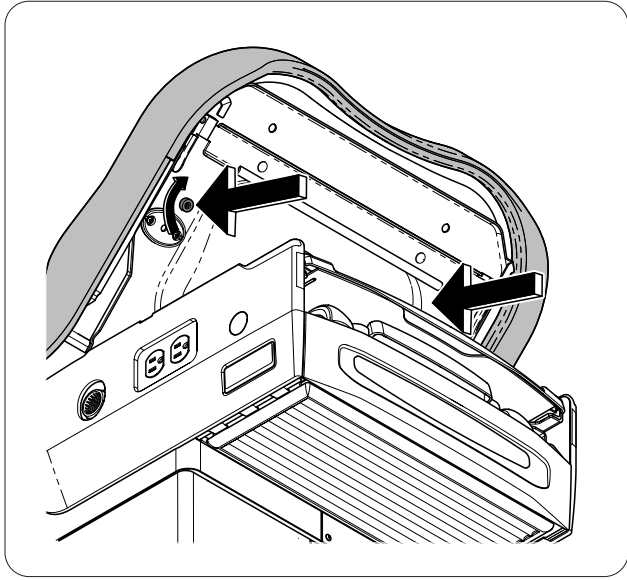


Étape 5 :
Relever l'assise à 90 degrés et fixer l'assise à l'aide des vis papillon fournies (2). Abaisser l'assise.

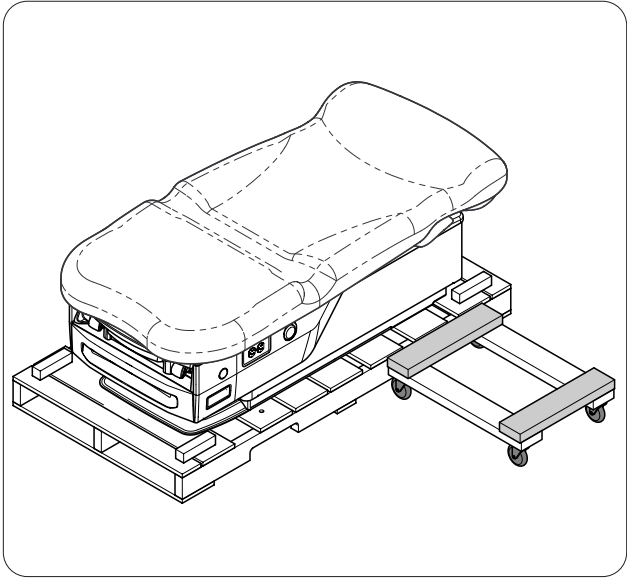

Étape 6 :
Placer le chariot à roulettes près de la tête du fauteuil.

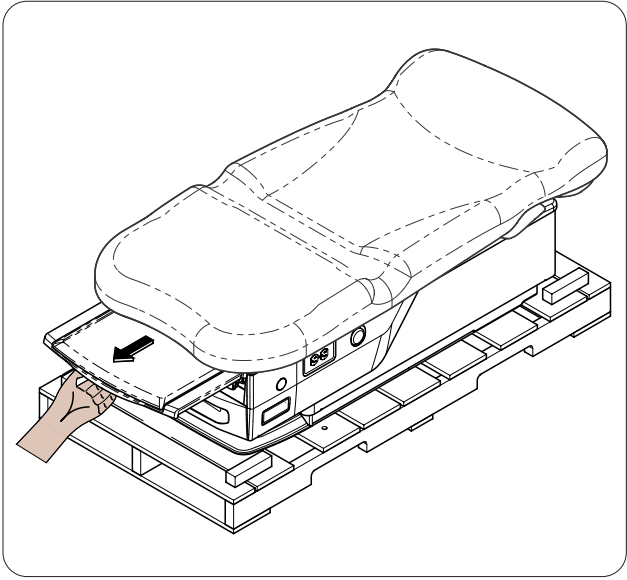


Étape 7 :
Sortir le repose-pied du fauteuil en le faisant glisser sur 23 à 25 cm (9 à 10 po).

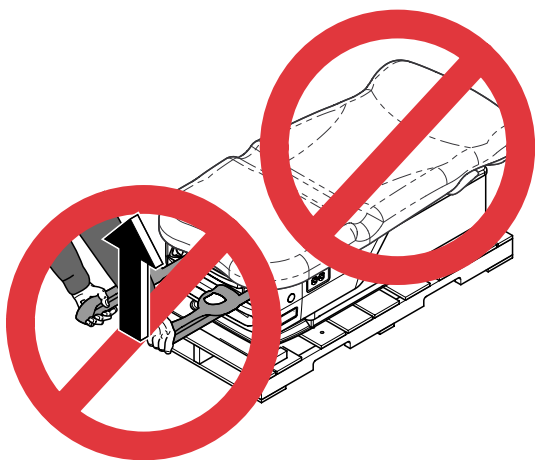


Avertissement concernant l'équipement

Ne PAS soulever le fauteuil en le tirant par la sellerie ou les étriers.

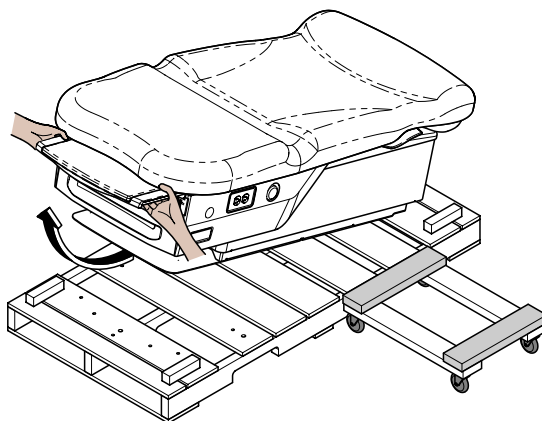


Étape 8 :

En appliquant les techniques de levage appropriées, soulever le fauteuil de la partie avant de la palette.

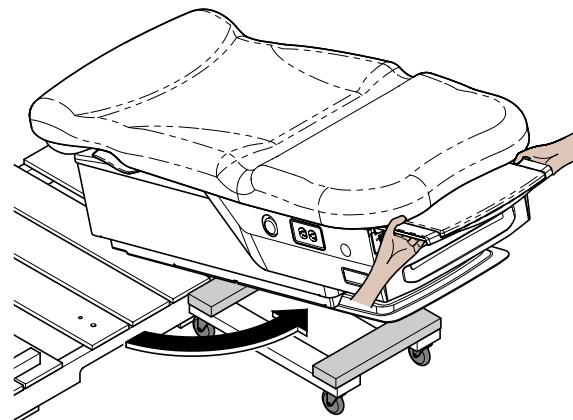


Étape 9 :

Faire pivoter le fauteuil en direction du chariot à roulettes.

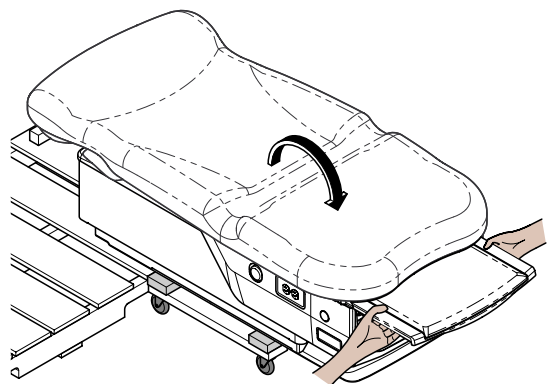


Étape 10 :

Abaïsser le fauteuil sur le chariot.

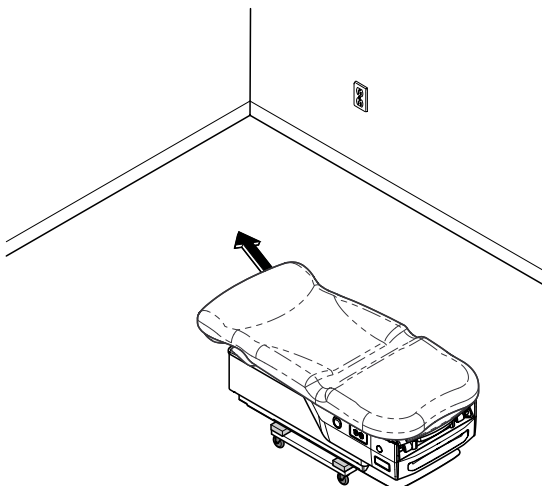

Étape 11 :



Placer le fauteuil à l'emplacement souhaité.

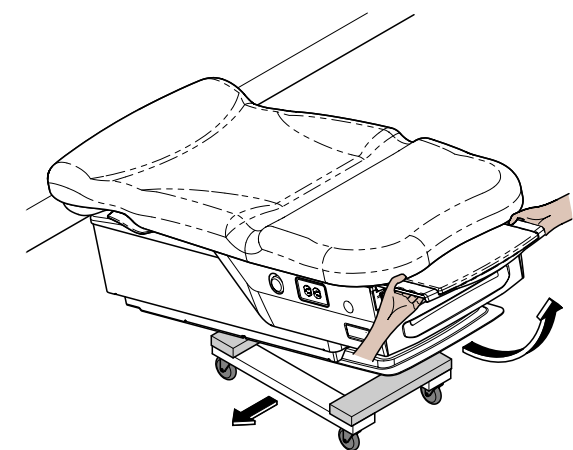

Étape 12 :

Retirer le fauteuil du chariot.

Avant de brancher le cordon d'alimentation de l'appareil Midmark à une prise électrique, il est recommandé de contacter un électricien agréé de votre localité ou une autorité locale compétente en matière de distribution électrique interne dans les bâtiments pour vérifier que l'appareil, une fois sous tension, sera conforme à tous les codes électriques locaux, étatiques et fédéraux. Utilisez la puissance nominale indiquée sur l'appareil lors de la détermination de l'alimentation électrique appropriée pour le circuit de dérivation et la prise. Pour les modèles d'appareil d'une puissance nominale de 115 V avec un courant nominal égal ou supérieur à 12 A, un circuit de dérivation dédié peut être nécessaire si la protection du circuit de dérivation est fournie par un disjoncteur de 15 A.

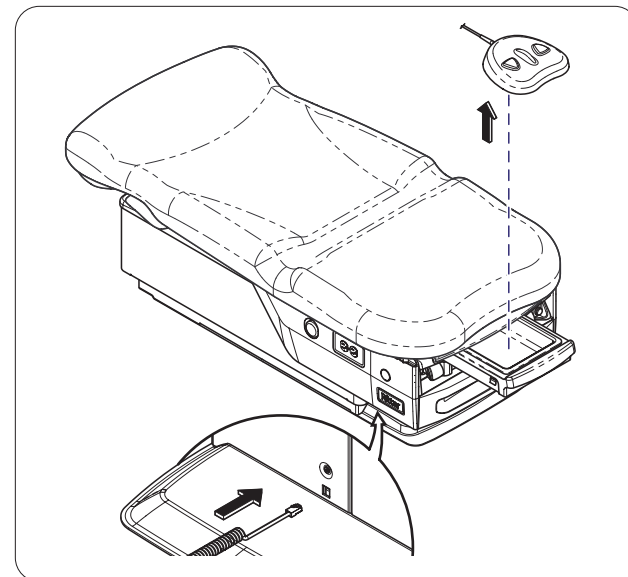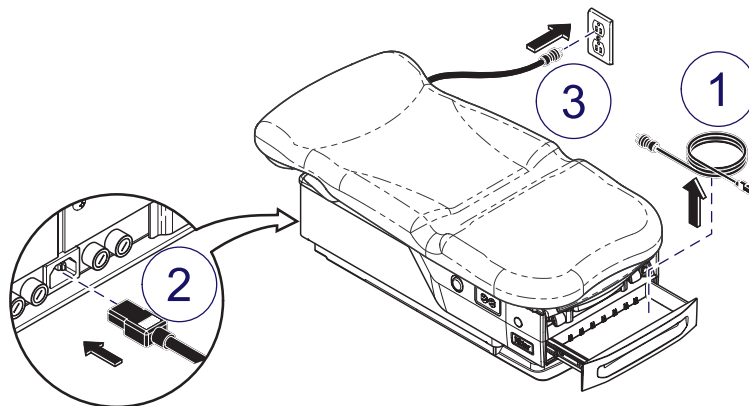


Étape 13 :

Retirer le cordon d'alimentation du tiroir, le brancher à la section arrière du fauteuil et le brancher ensuite dans une prise de courant murale ou de plancher.


Étape 14 :

Retirer la pédale de commande de la cuvette.
Brancher la pédale de commande à la base avant du fauteuil.

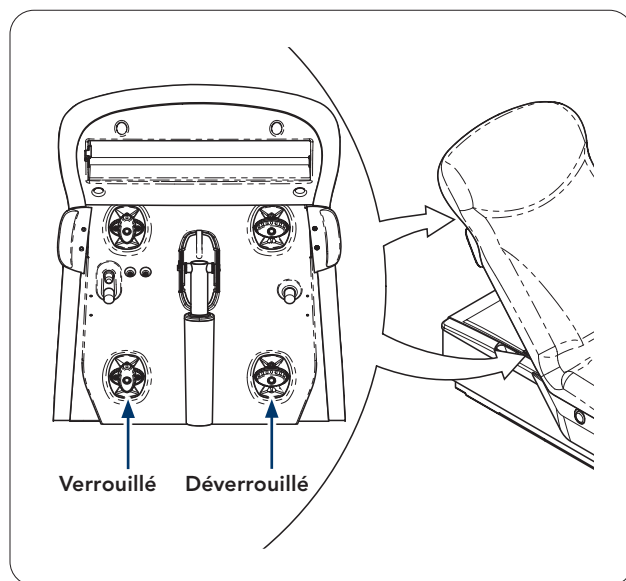


Étape 15 :

Relever le dossier et enclencher les boutons de verrouillage de la sellerie (4).

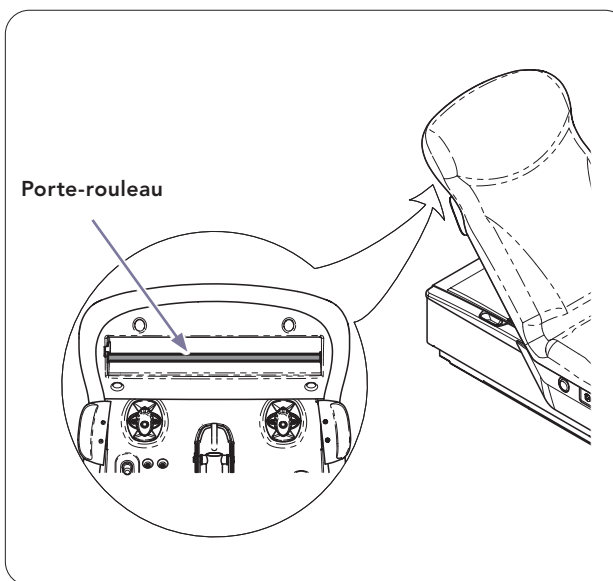

Étape 16 :

S'assurer que le support du rouleau de papier est en place.

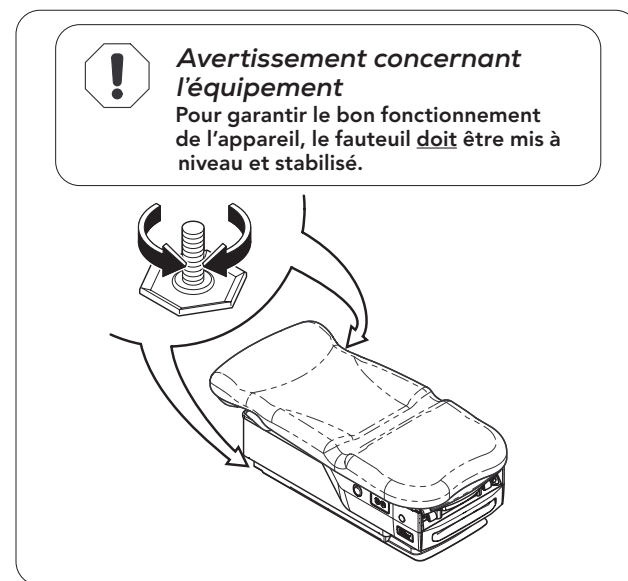


Avertissement concernant l'équipement


Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, le fauteuil doit être mis à niveau et stabilisé.

Étape 17 :

Ajuster les vis réglables (2) près de la tête du fauteuil pour mettre le fauteuil à niveau ou le stabiliser.

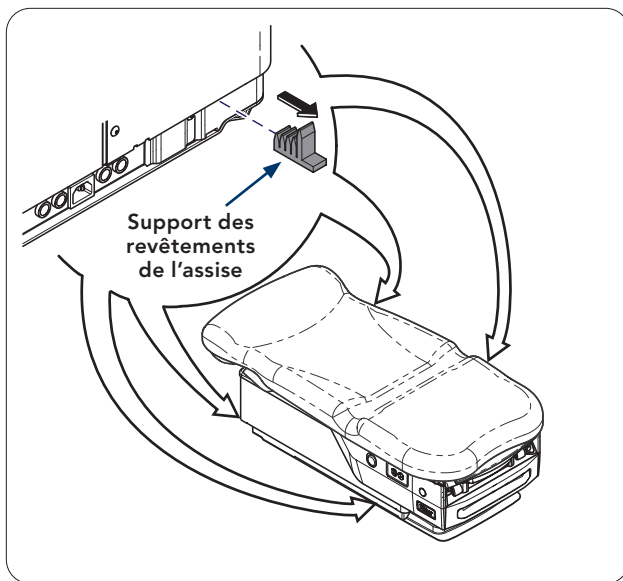


Étape 18 :
Retirer les supports des revêtements de l'assise (4).

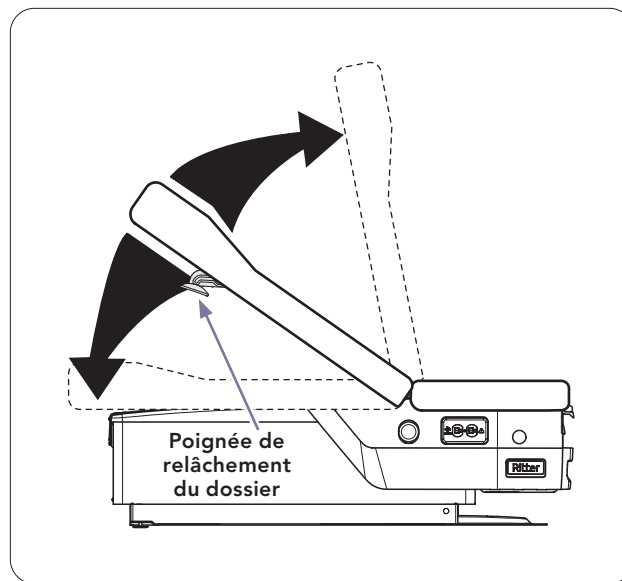


Étape 19 : (Modèle 228 uniquement)
Vérifier le fonctionnement manuel correct du dossier.

Remarque
En cas de dysfonctionnement, contacter le service technique de Midmark en composant le : 1.844.856.1230.

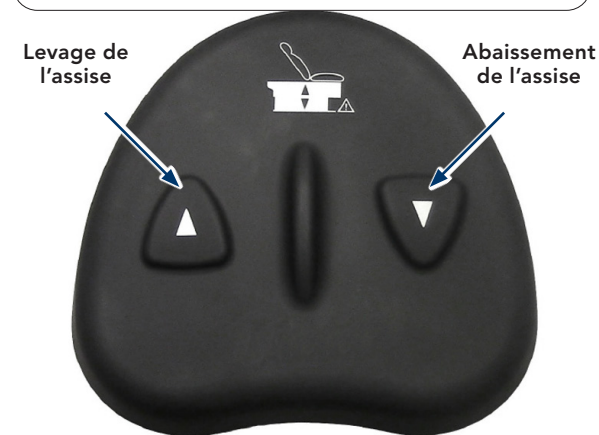


Étape 20 : (Modèle 228 uniquement)
Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de commande. Appuyer sur les boutons Monter/Descendre l'assise.

Remarque
En cas de dysfonctionnement, contacter le service technique de Midmark en composant le : 1.844.856.1230.

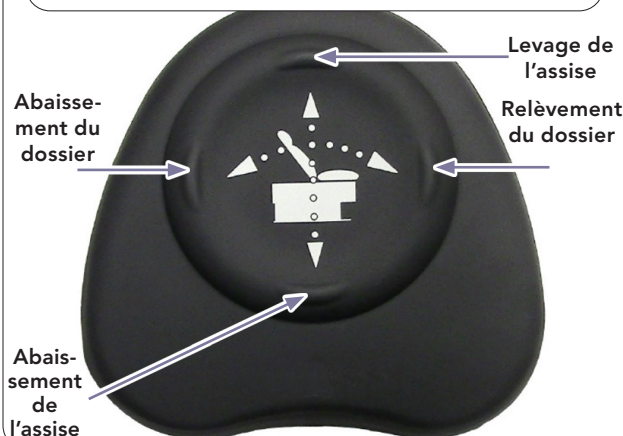

Étape 21 : (Modèle 229 uniquement)
Vérifier le bon fonctionnement de la pédale de commande. Appuyer sur les boutons Relèvement/Abaissement de l'assise et Relèvement/Abaissement du dossier.

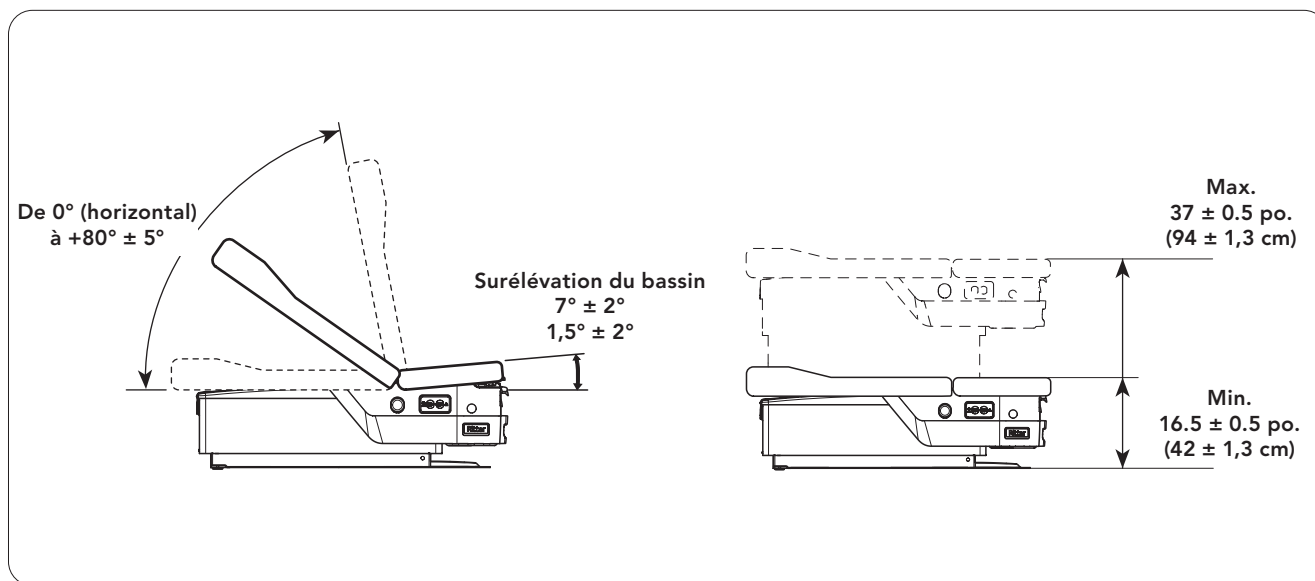

Plage d'inclinaison/de déplacement du fauteuil

Instrucciones de instalación del sillón de examen eléctrico 228/229 Barrier-Free®

Herramientas:

Taladro a batería/destornillador de impacto
Juego de llaves inglesas estándar
Conjunto estándar de vasos profundos
Caja de cúter
Plataforma móvil para muebles (4 ruedas)



ADVERTENCIA

Objeto pesado. Utilice dispositivos de ayuda para la elevación o técnicas de elevación adecuadas para mover el sillón y evitar el riesgo de sufrir distensiones musculares o lesiones en la espalda.




Advertencia sobre el equipo

Para mover el sillón debe seguir las siguientes instrucciones.


SIEMPRE: a) Transporte el sillón completamente bajado, con los soportes de la cubierta de la base colocados.


NUNCA: a) Haga presión sobre la cubierta de la base.
b) Levante el sillón por los estribos, la sección trasera o la parte superior tapizada.

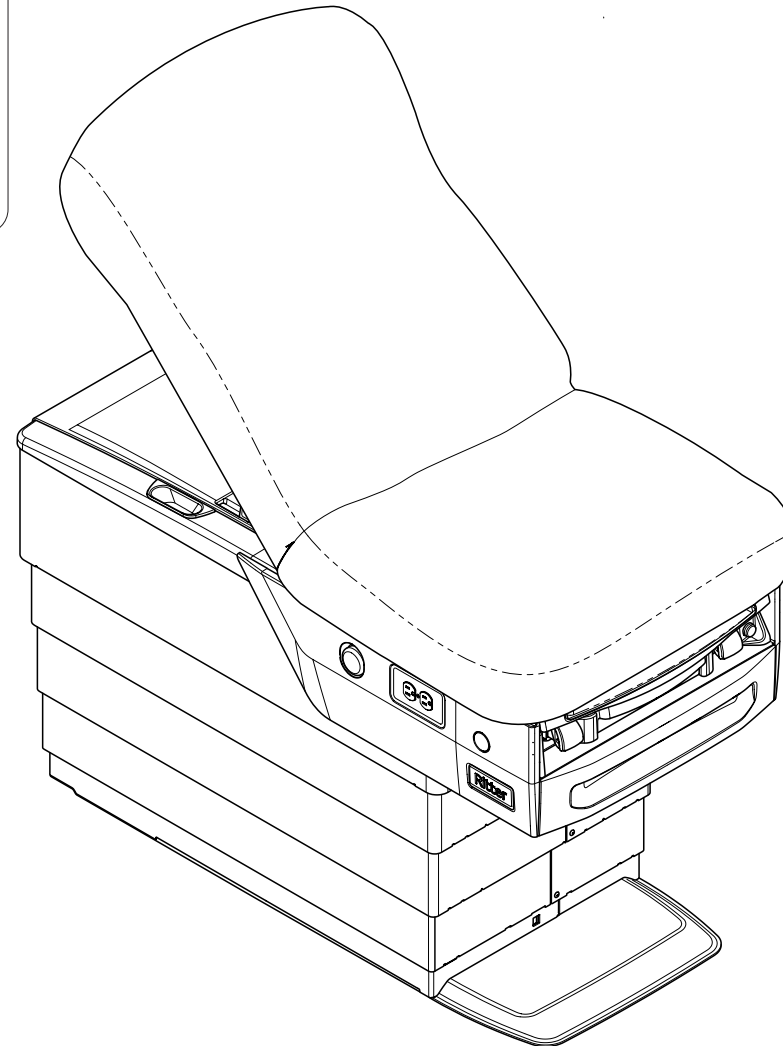


Paso 1:

Retire los tornillos (4) de la plataforma para liberar el sillón.

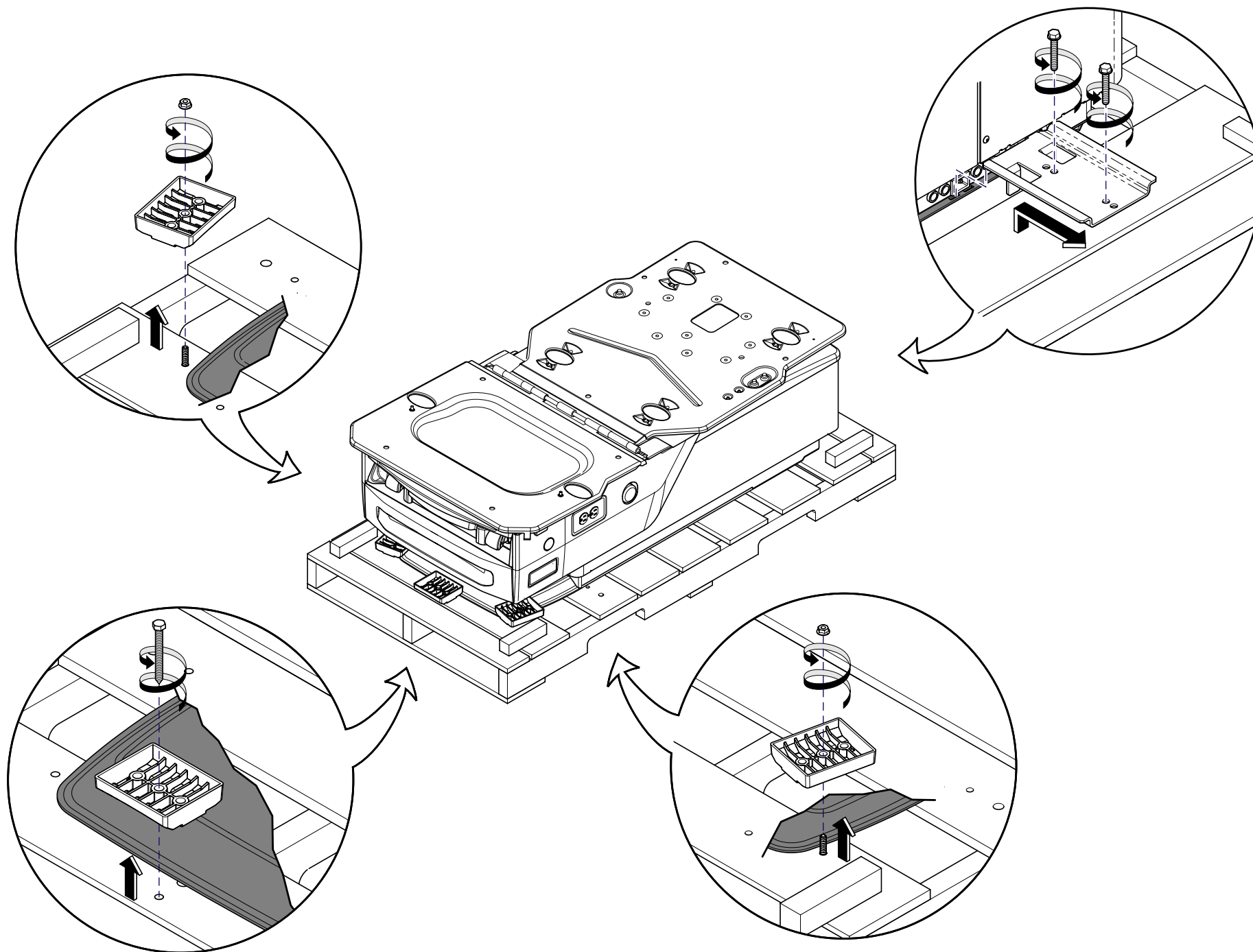


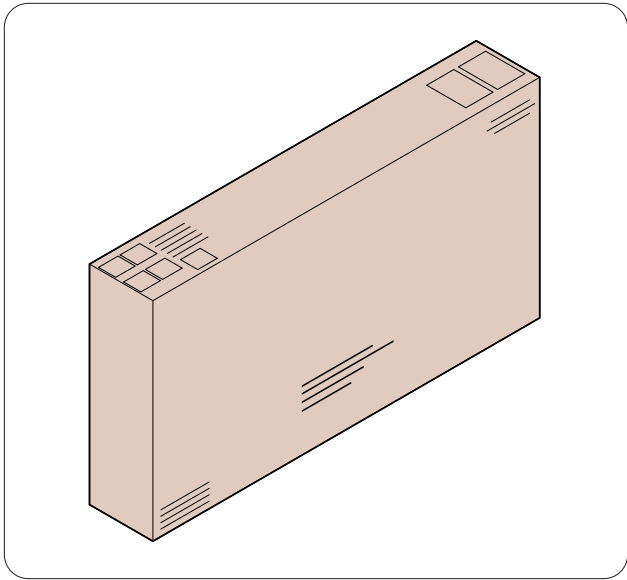


Paso 2:
Localice la caja que contiene la tapicería.

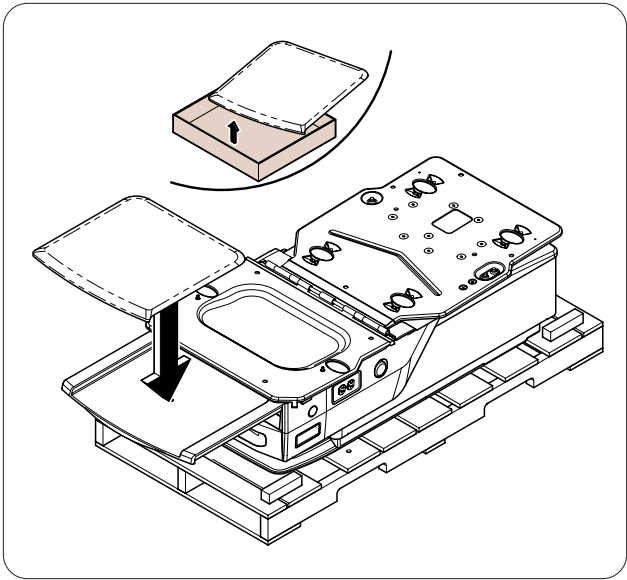


Paso 3:
Coloque la tapicería del reposapiés insertando la pieza de la parte inferior de la tapicería en el orificio de la estructura del reposapiés.

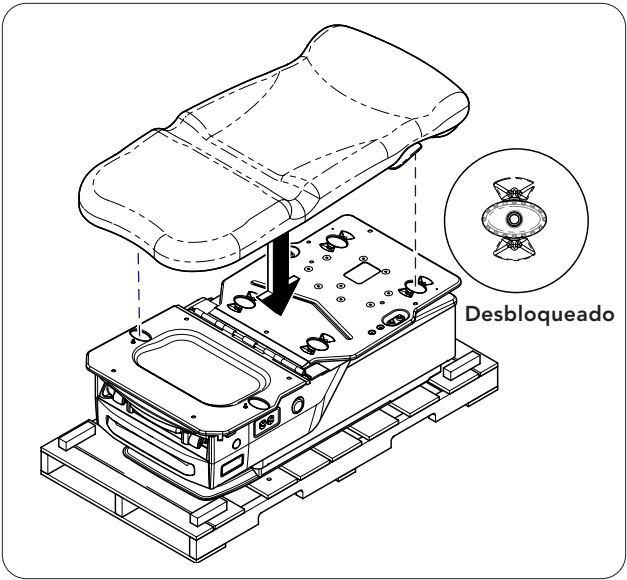


Paso 4:
Con los botones de bloqueo (4) en posición desbloqueada y coloque la tapicería sobre el sillón alineando los botones de bloqueo con los orificios.

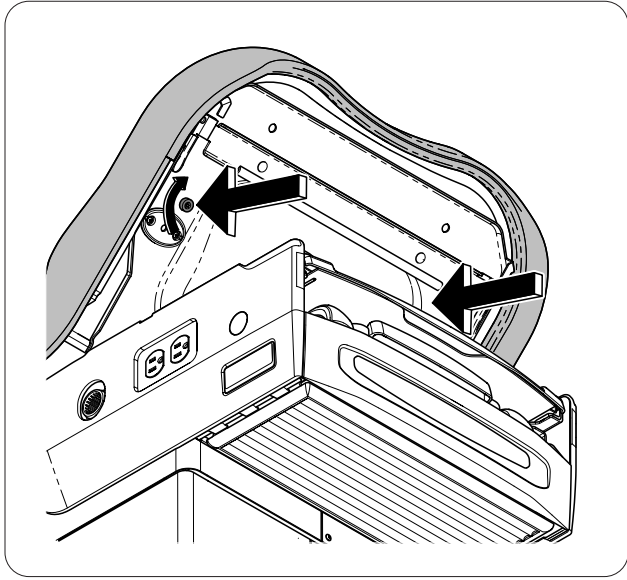


Paso 5:
Levante el asiento 90 grados y asegure la sección del asiento con tornillos de mariposa (2). Baje el asiento.

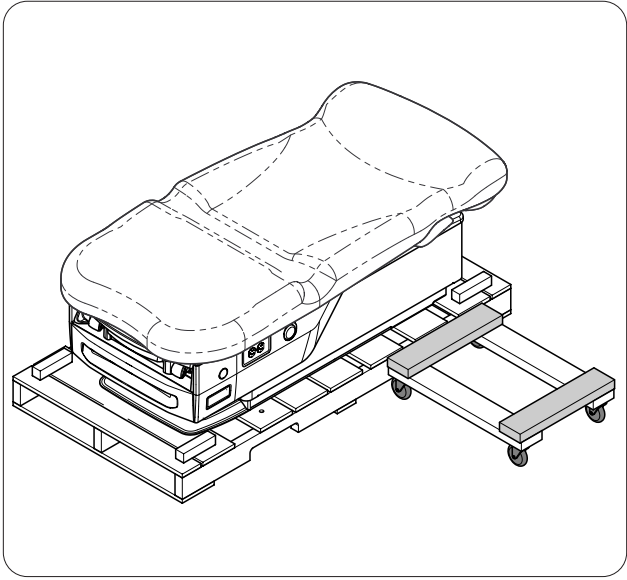


Paso 6:
Coloque la plataforma móvil a la altura del reposacabezas del sillón.

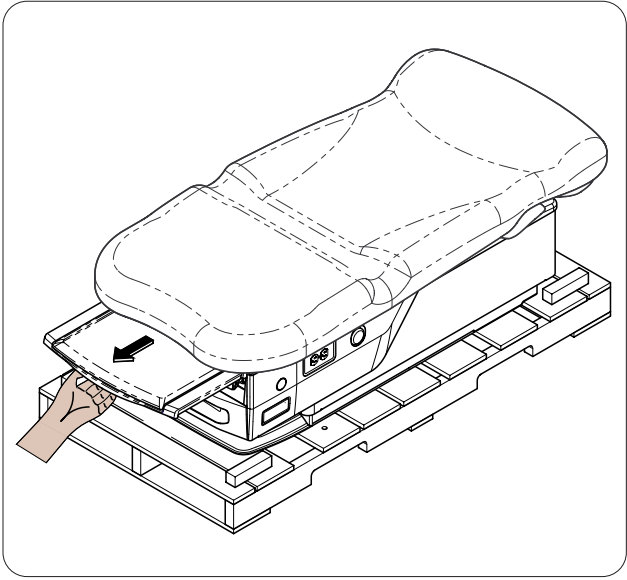


Paso 7:
Deslice el reposapiés de 9 a 10 pulgadas hacia fuera del sillón.

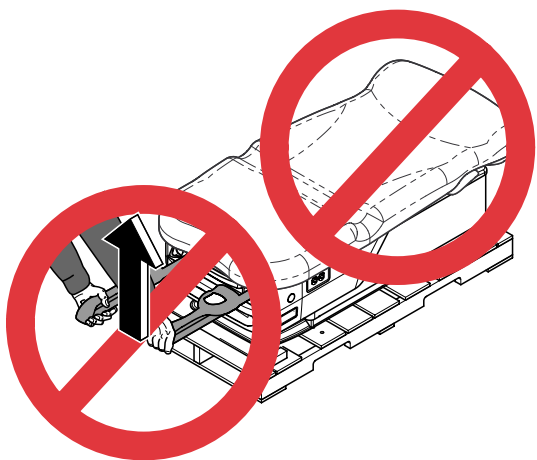


Advertencia sobre el equipo
NO levante el sillón por la tapicería
ni los estribos.

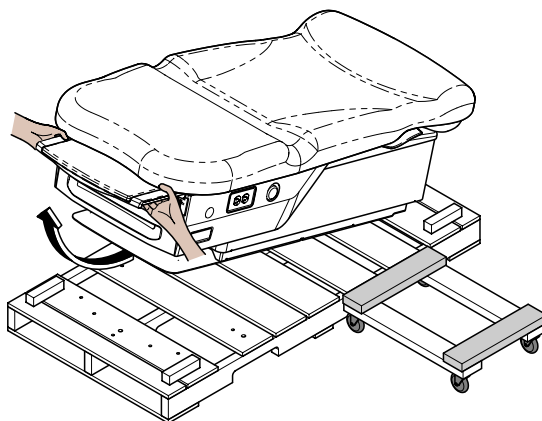


Paso 8:
Utilizando la técnica de elevación adecuada, levante el sillón
por la parte delantera de la plataforma.

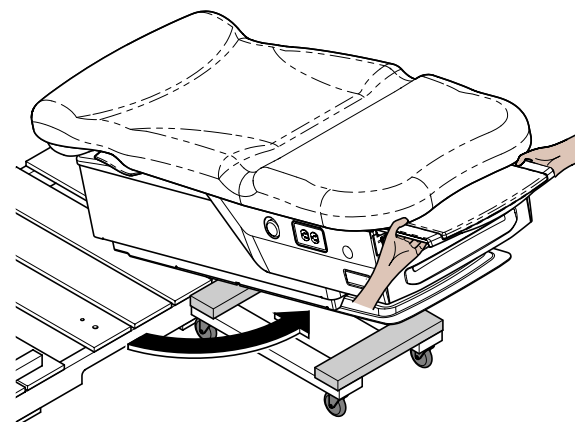


Paso 9:
Gire el sillón hacia la plataforma móvil.

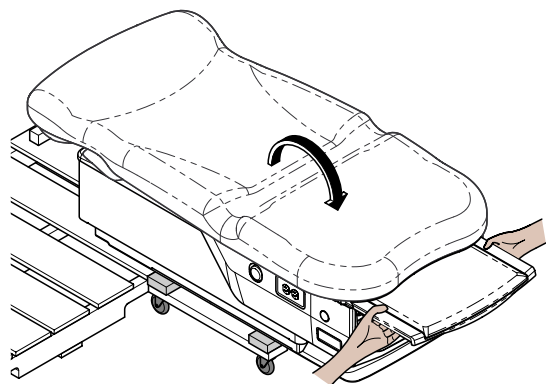

Paso 10:
Deposite el sillón sobre la plataforma móvil.

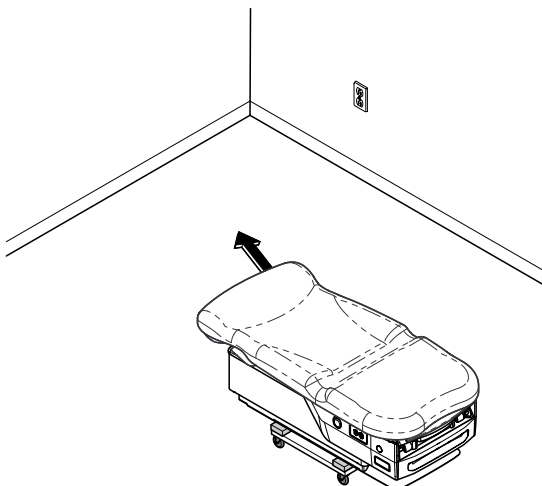


Paso 11:
Mueva el sillón hasta el lugar deseado.

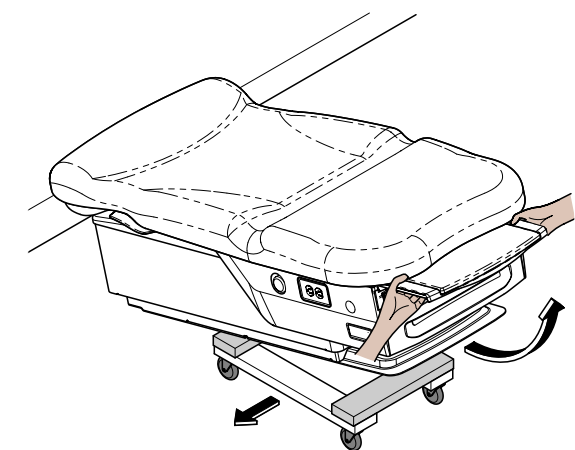


Paso 12:
Retire el sillón de la plataforma móvil.

Antes de conectar el cable de alimentación del dispositivo Midmark a una fuente de alimentación eléctrica, se recomienda contactar con un electricista local autorizado o una autoridad local que tenga jurisdicción sobre la distribución de energía interna del edificio para verificar que, al conectar el dispositivo, este cumple con todos los códigos eléctricos locales, autonómicos y nacionales. Utilice la potencia eléctrica marcada en el dispositivo para determinar cuáles son los circuitos eléctricos derivados apropiados y los requisitos de salida. Para modelos de 115 V con una calificación de corriente de 12 amperios o más, puede requerirse un circuito dedicado en caso de que la protección de dicho circuito provenga de un disyuntor de 15 amperios.

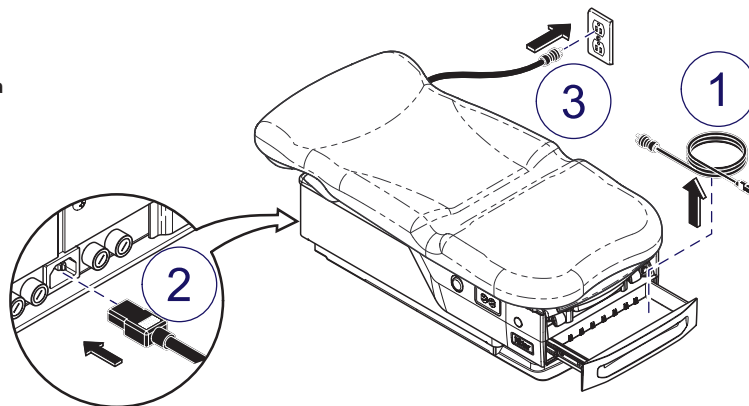


Paso 13:

Saque el cable de alimentación del cajón, conéctelo a la parte trasera del sillón y enchúfelo a la toma de la pared o del suelo.

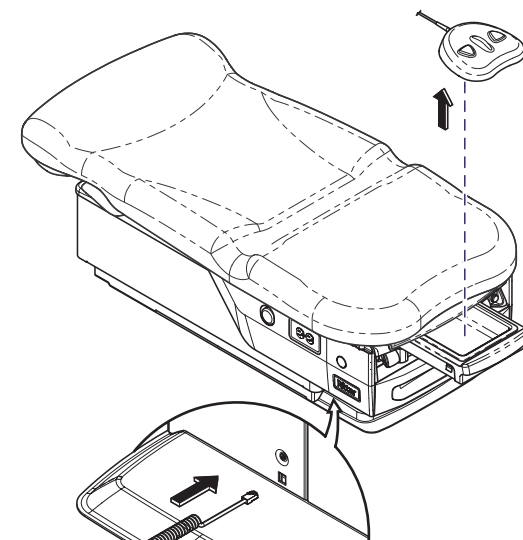


Paso 14:

Saque el pedal de control de la bandeja de tratamiento. Conecte el pedal de control en la base delantera del sillón.

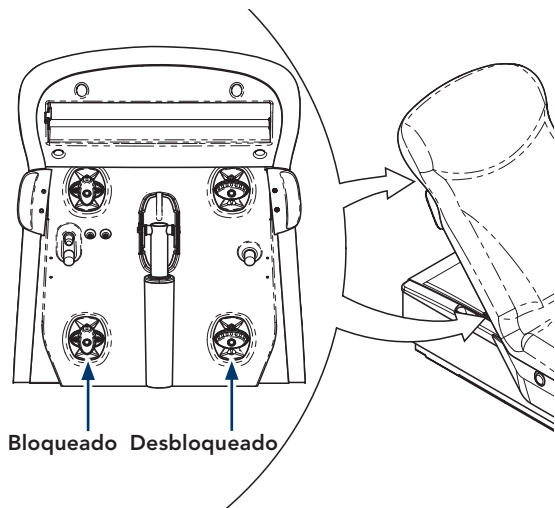

Paso 15:

Levante el respaldo y cierre los botones de bloqueo (4) de la tapicería.

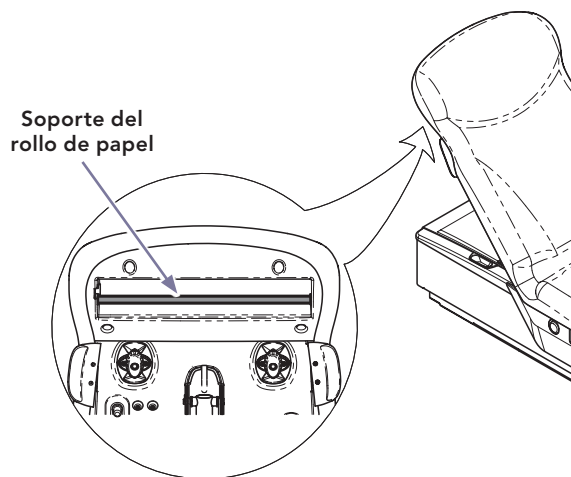


Paso 16:

Asegúrese de que el soporte del rollo de papel esté en su lugar.




Advertencia sobre el equipo

El sillón debe estar nivelado o fijo para su correcto funcionamiento.

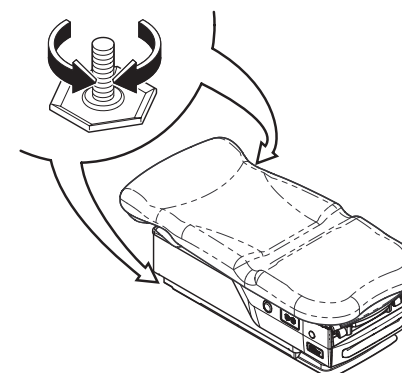


Paso 17:

Ajuste los tornillos de nivelación (2) que se encuentran a la altura del reposacabezas del sillón para nivelarlo o bascarlo.

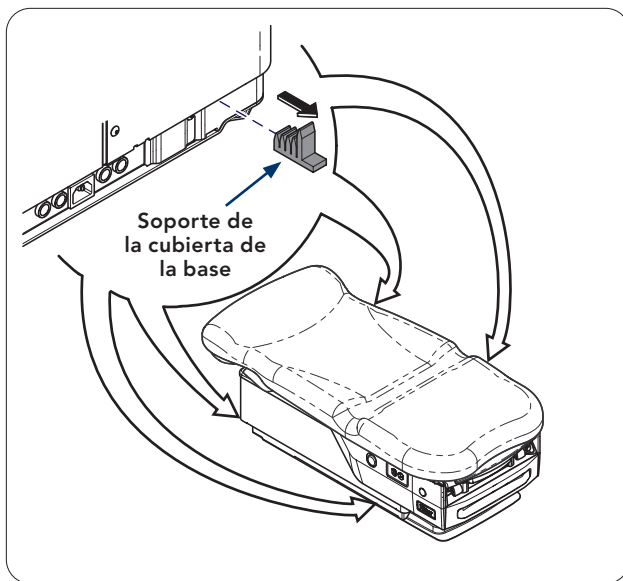


Paso 18:
Retire los soportes de la cubierta de la base (4).

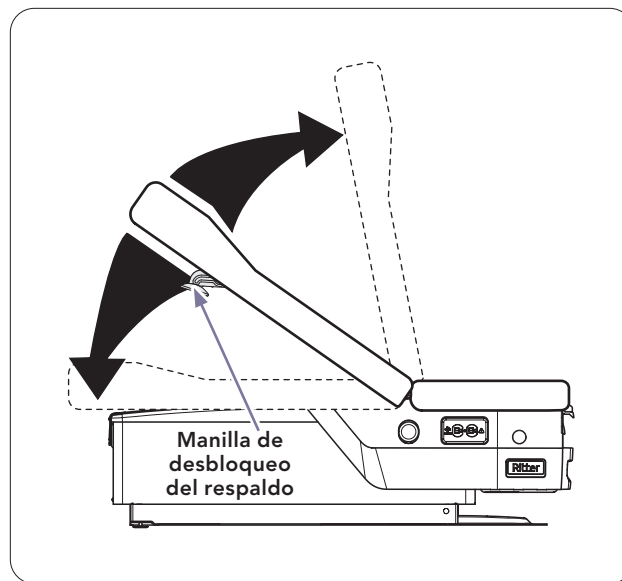


Paso 19: (solo 228)
Compruebe el correcto funcionamiento manual del respaldo.

Nota
Si detecta que el funcionamiento es incorrecto, póngase en contacto con el servicio técnico de Midmark llamando al número: 1.844.856.1230.


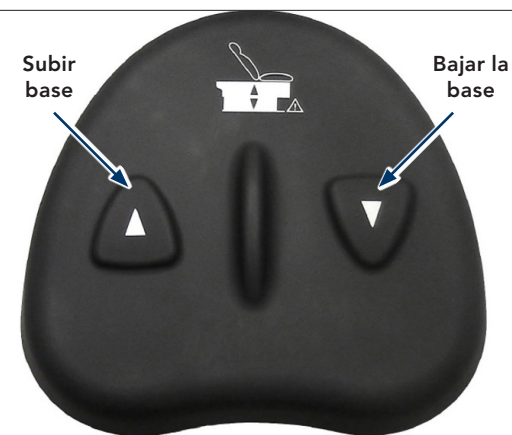


Paso 20: (solo 228)
Compruebe si el pedal de control funciona correctamente. Pulse los botones Subir/bajar base.

Nota
Si detecta que el funcionamiento es incorrecto, póngase en contacto con el servicio técnico de Midmark llamando al número: 1.844.856.1230.

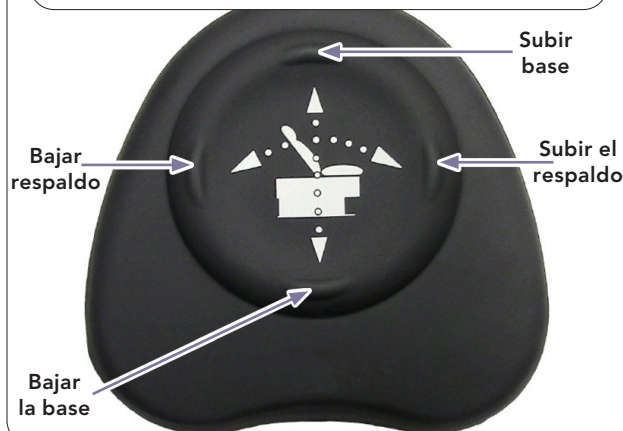

Paso 21: (solo 229)
Compruebe si el pedal de control funciona correctamente. Pulse los botones Subir/bajar base y Subir/bajar respaldo.

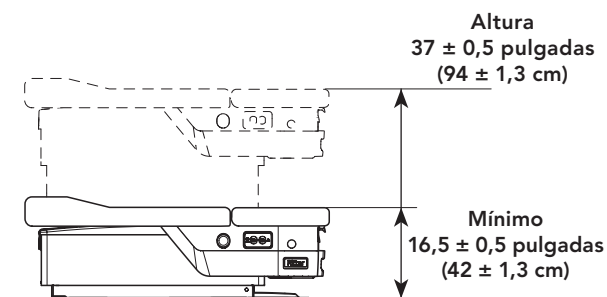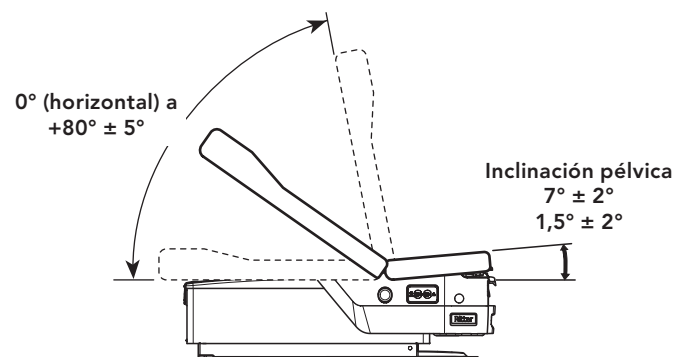

Amplitud de movimiento del sillón